



beurer

MP 62



EL Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ
Οδηγίες χρήσεως

CE

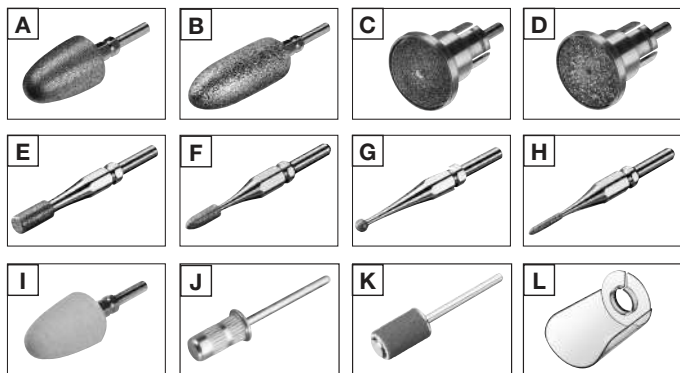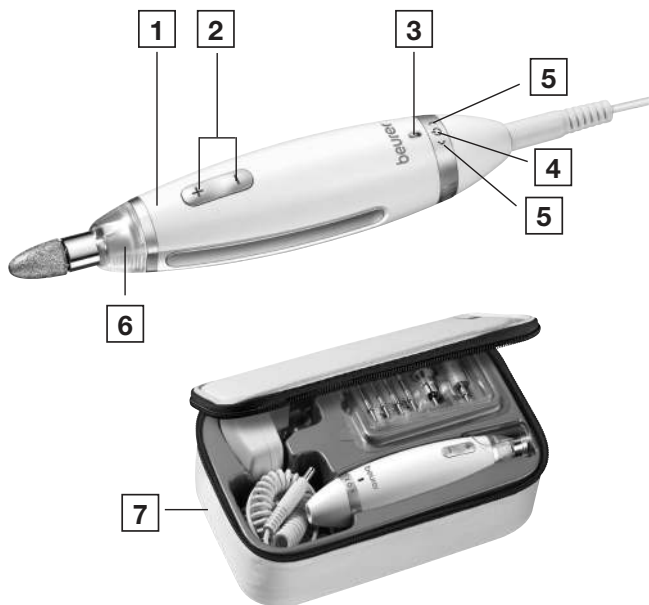



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Διαθέστε τις οδηγίες χρήσης και σε άλλους χρήστες. Εάν η συσκευή μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη παρέχετε απαραίτητα και τις οδηγίες χρήσης.

Πίνακας περιεχομένων

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	5
2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	10
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ.....	13
6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ.....	16
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.....	17
8. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	17
9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	18
10. ΕΓΓΥΗΣΗ.....	18

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί και με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο στον οικιακό/ιδιωτικό τομέα, όχι στον επαγγελματικό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβες ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους εμπόρους.

- Αν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της συσκευής πάθει κάποια ζημιά, πρέπει να απορρίπτεται. Αν το καλώδιο δεν αποσυνδέεται από τη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται όλη η συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιποίησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαβητικούς, αφού είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον πόνο και μπορούν να προκληθούν ευκολότερα τραυματισμοί. Τα εξαρτήματα που παρέρχονται μαζί με το MP 61 είναι κατ' αρχάς κατάλληλα για διαβητικούς. Προσέχετε όμως να μην εργάζεστε σε μεγάλο αριθμό στροφών και να εργάζεστε ιδιαίτερα προσεκτικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης και έντονης χρήσης της συσκευής, π.χ. λείανση κεράτωσης στα πόδια, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα του δέρματος, πρέπει να κάνετε μεγάλες παύσεις ανάμεσα στις επιμέρους χρήσεις. Για τη δική σας ασφάλεια ελέγχετε διαρκώς την ανάπτυξη θερμότητας στη συσκευή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Απενεργοποιείτε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση βλαβών και δυσλειτουργιών.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρελκόμενα που παρέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα.
- Αποφύγετε κάθε επαφή της συσκευής με νερό (εκτός από τις περιπτώσεις όπου την καθαρίζετε με ένα υγρό πανί). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα, στο ντους, στην πισίνα ή πάνω από έναν νιπτήρα γεμάτο νερό. Αν παρόλα αυτά εισχωρήσει νερό στο περίβλημα, τραβήξτε αμέσως την πρίζα της συσκευής από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Προσέξτε κατά τη χρήση να μην πιάνονται μαλλιά στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Για τη δική σας ασφάλεια δένετε τα μαλλιά με ένα λαστιχάκι.
- Τα χέρια σας πρέπει να είναι στεγνά κάθε φορά που αγγίζετε τη συσκευή και το τροφοδοτικό βύσμα.
- Κατά τη χρήση σε ακρυλικά νύχια, νύχια τζελ ή τεχνητά νύχια, φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκα FFP2, προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά).
- Κατά τη χρησιμοποίηση μπορεί να αναπτυχθεί υψηλή θερμοκρασία επάνω στο δέρμα.
- Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαβητικούς, αφού είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον πόνο και μπορούν να προκληθούν ευκολότερα τραυματισμοί. Τα εξαρτήματα που παρέρχονται μαζί με τη συσκευή, είναι κατ' αρχήν κατάλληλα για διαβητικούς. Προσέχετε όμως να μην εργάζεστε σε μεγάλο αριθμό στροφών και να εργάζεστε ιδιαίτερα προσεκτικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και με τον τρόπο που αναφέρεται επάνω στις οδηγίες χρήσης. Κάθε ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Σε περίπτωση εντατικής χρήσης μακράς διάρκειας της συσκευής, π. χ. αφαίρεση των κάλων στα πόδια, μπορεί η συσκευή να αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία. Για να αποφύγετε εγκαύματα στο δέρμα, πρέπει να κάνετε διαλείμματα μεγαλύτερης διάρκειας μεταξύ των μεμονωμένων χρήσεων της συσκευής. Για τη δική σας ασφάλεια ελέγχετε συνεχώς την ανάπτυξη θερμοκρασίας της συσκευής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν την αίσθηση της θερμότητας.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές, οι οποίες έχουν προκληθεί από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση.
- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή και τα πρόσθετα εξαρτήματα δεν εμφανίζουν καμιά ορατή βλάβη. Σε περίπτωση αμφιβολιών μην τη χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε στο εμπορικό κατάστημα ή στην αναφερόμενη διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης πελατών.
- Η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται συχνά, εάν εμφανίζει ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή σε περίπτωση που η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο, πριν από μια νέα χρήση, θα πρέπει να μεταφερθεί στον κατασκευαστή ή στο εμπορικό κατάστημα.
- Απενεργοποιείτε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων λειτουργίας.
- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελεστούν μόνο από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών ή τα εξουσιοδοτημένα εμπορικά καταστήματα.
- Σε καμιά περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι τη συσκευή!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα προμηθευόμενα πρόσθετα εξαρτήματα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, για να τα προστατέψετε από πιθανούς κινδύνους.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτες, μαξιλάρια, κτλ.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε λειτουργία αδιάκοπα πάνω από 15 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να κάνετε διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτά, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους. Μην αποθηκεύετε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σε σημεία, από τα οποία μπορεί να πέσει μέσα στη λεκάνη του μπάνιου ή στο νιπτήρα.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Εάν η συσκευή έχει πέσει μέσα σε νερό, αποσυνδέετε αμέσως το φισ – τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Τα χέρια σας πρέπει σε κάθε χρήση της συσκευής και του φισ – τροφοδοτικού να είναι στεγνά.
- Μην τραβάτε από το ηλεκτρικό καλώδιο ή από τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φισ τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Το τροφοδοτικό επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο με την ηλεκτρική τάση που αναφέρεται επάνω.
- Εάν το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο, δεν χρησιμοποιείτε πλέον το μετασχηματιστή!
- Η συσκευή για λόγους υγιεινής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σ' ένα άτομο.

2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Στη συσκευή, στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Διαβάστε τις οδηγίες
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Χαρακτηρίζει έναν πιθανό επικείμενο κίνδυνο. Εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Χαρακτηρίζει έναν πιθανό επικείμενο κίνδυνο. Εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή μικρούς τραυματισμούς.
 ΥΠΟΔΕΙΞΗ	Χαρακτηρίζει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή στον περιβάλλοντα χώρο.
	Σήμανση CE Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
	Κατασκευαστής
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Διαχωρίστε τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
	Σήμανση για την αναγνώριση του υλικού συσκευασίας. A = Σύντμηση υλικού, B = Αριθμός υλικού: 1-7 = Πλαστικά, 20-22 = Χαρτί και χαρτόνι

	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
	Πληροφορίες προϊόντος Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες
	Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου
	Polaridade de fonte de alimentação CC
	Συνεχές ρεύμα Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για συνεχές ρεύμα
	Συσκευή κατηγορίας προστασίας II Η συσκευή φέρει διπλή προστατευτική μόνωση και κατά συνέπεια αντιστοιχεί με την κατηγορία προστασίας 2
	Ενεργειακή απόδοση επίπεδο 6
	Ημερομηνία κατασκευής
	Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, με προστασία από βραχυκυκλώματα
	Μονάδα τροφοδοτικού, λειτουργία μεταγωγής, μονάδα τροφοδοτικού μεταγωγής, SMPS
	Διαχωρίστε το προϊόν και τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
	Μην χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή, αν το φιλ έχει υποστεί βλάβη.

	Εναλλασσόμενο ρεύμα
	Σύμβολο εισαγωγέα

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική χαρτονένια συσκευασία είναι ακέραιη και το περιεχόμενο πλήρες. Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώνετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.

- 1 x Συσκευή μανικιούρ και πεντικιούρ
- 10 x εξαρτήματα υψηλής ποιότητας από ζαφείρι και τσόχα
- 10 x φρεζάκια γυαλόχαρτου μίας χρήσης
- 1 x Μετασχηματιστής
- 1 x Τσάντα φύλαξης
- 1 x Οδηγίες χρήσης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τα σχετικά σχέδια απεικονίζονται στη σελίδα 3.

1 Συσκευή μανικιούρ/πεντικιούρ	5 Δεξιόστροφο/ αριστερόστροφο
2 Ρύθμιση ταχύτητας +/-	6 Φως LED
3 Λυχνία ελέγχου φόρτισης	7 Τσάντα φύλαξης
4 Διακόπτης On/Off	

! Μετά από κάθε χρήση, πριν από κάθε καθαρισμό και πριν από κάθε αλλαγή πρόσθετων εξαρτημάτων πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το φιλτράρισμα – τροφοδοτικό από την πρίζα. Προσέξτε ο συρόμενος διακόπτης στη συσκευή να βρίσκεται στη μεσαία θέση (απενεργοποίηση), πριν την συνδέσετε με την παροχή ρεύματος.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προσέξτε να έχει προηγουμένως απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Επιλέγεται το επιθυμητό πρόσθετο εξάρτημα και το τοποθετείτε με ελαφρά πίεση επάνω στον άξονα της συσκευής. Οι προσθήκες ασφαλίζουν (ακούγεται ελαφρά). Για την αφαίρεση τραβάτε την προσθήκη από τη συσκευή σε ευθεία κατεύθυνση.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, μετακινώντας τον δακτύλιο-διακόπτη προς τα αριστερά (αριστερή φορά) ή προς τα δεξιά (δεξιά φορά), η LED ανάβει μπλε. Με τα δύο πλήκτρα, τα οποία φέρουν σήμανση συν (+) και μείον (-), μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό στροφών του κινητήριου άξονα. Σε κάθε εφαρμογή αρχίζετε με χαμηλό αριθμό στροφών και τον αυξάνετε εάν απαιτείται.
- Όλες οι προσθήκες για λιμάρισμα και λείανση είναι επιστρωμένες με κόκκους ζαφειριού. Αυτό εγγυάται ακραία ανθεκτικότητα και εξασφαλίζει ώστε τα εξαρτήματα στη διάρκεια του χρόνου να μην εμφανίζουν σχεδόν χωρίς καμιά φθορά.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση και οδηγείτε τις προσθήκες πάντα προσεκτικά επάνω στην επιφάνεια επεξεργασίας.
- Οδηγείτε τη συσκευή με ελαφρά πίεση και με κυκλικές κινήσεις αργά επάνω στα επεξεργασμένα τμήματα.
- Προσέχετε, ότι οι προσθήκες λείανσης σε περίπτωση μουλιασμένου ή υγρού δέρματος εμφανίζουν μια μειωμένη απόδοση. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε, να μην κάνετε καμιά αρχική περιποίηση σε λουτρό νερού.
- Δεν αφαιρείτε ολόκληρη την κεράτινη στιβάδα του δέρματος, για να διατηρήσετε τη φυσική προστασία του δέρματος.

- Προσέχετε ώστε, ο άξονας να μπορεί να κινείται πάντα ελεύθερα. Ο άξονας δεν επιτρέπεται να είναι συνεχώς μπλοκαρισμένος, διότι διαφορετικά η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να υποστεί βλάβη.
- Μετά από κάθε περιποίηση χρησιμοποιείτε μια ενυδατική κρέμα επάνω στα επεξεργασμένα τμήματα.

Προσθήκες

A – Λεπτός κώνος με επίστρωση ζαφειριού

Κατάλληλος για την αφαίρεση του ξηρού δέρματος ή των κάλων από τα πέλματα και τις φτέρνες και για τη περιποίηση των νυχιών. Μην αφαιρείτε όλους τους κάλους για να διατηρήσετε τη φυσική προστασία του δέρματος.

B – Τραχύς κώνος με επίστρωση ζαφειριού

Κατάλληλος για τη γρήγορη αφαίρεση σκληρού δέρματος και μεγάλων κάλων, από το πέλμα και τη φτέρνα. Αυτό το εξάρτημα προορίζεται για εφαρμογή σε μεγάλες περιοχές. Μην αφαιρείτε όλους τους κάλους για να διατηρήσετε τη φυσική προστασία του δέρματος.

C – Λεπτός δίσκος με επίστρωση ζαφειριού

Κατάλληλο για λιμάρισμα και περιποίηση των νυχιών με λεπτό δίσκο από επίστρωση ζαφειριού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του δίσκου με επίστρωση ζαφειριού είναι ότι ενώ περιστρέφεται ο εσωτερικός τροχός λείανσης, δεν περιστρέφεται το εξωτερικό περίβλημα. Αυτό καθιστά δυνατό το λιμάρισμα των νυχιών με απόλυτη ακρίβεια χωρίς τον κίνδυνο να καεί το δέρμα από τη γρήγορη περιστροφή του δίσκου.

D – Τραχύς δίσκος με επίστρωση ζαφειριού

Κατάλληλος για λιμάρισμα και περιποίηση των νυχιών. Με αυτό το εξάρτημα καθίσταται δυνατή ακόμη και η κοπή των χοντρών νυχιών. Ωστόσο, να είστε προσεχτικοί κατά τη χρήση του καθώς αφαιρεί γρήγορα μεγάλες περιοχές του νυχιού.

Ε – Κυλινδρική φρέζα

Κατάλληλη για τη στίλβωση ακατέργαστων επιφανειών και εξομάλυνση των χοντρών νυχιών. Για το σκοπό αυτό, τοποθετήστε την κυλινδρική φρέζα οριζόντια στην επιφάνεια του νυχιού και αφαιρέστε την επιφάνεια του νυχιού μετακινώντας τη συσκευή αργά και κυκλικά.

Φ – Φρέζα σχήματος φλόγας

Κατάλληλη για την αφαίρεση νυχιών που έχουν μεγαλώσει προς τα μέσα. Για το σκοπό αυτό, πλησιάστε προσεκτικά τη φρέζα σχήματος φλόγας στην περιοχή της θεραπείας και αφαιρέστε τα απαραίτητα τμήματα του νυχιού.

Γ – Φρέζα με επίστρωση από ζαφείρι, στρογγυλή

Κατάλληλη για την προσεκτική αφαίρεση των κάλων. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το εξάρτημα, λάβετε υπόψη, ότι ενδέχεται να διεισδύσετε βαθύτερα στο δέρμα κατά την αφαίρεση της στιβάδας δέρματος του κάλου, τραυματίζοντας με τον τρόπο αυτό το περίοστεο.

Η – Φρεζάκι σχήματος βελόνας

Κατάλληλο για την αφαίρεση νυχιών που έχουν μεγαλώσει προς τα μέσα και για την κοπή νεκρωμένων τμημάτων των νυχιών. Λειτουργήστε τον νυχοκόπτη σε χαμηλή ταχύτητα.

Ι – Κώνος με τσόχα

Κατάλληλο για λείανση και γυάλισμα των άκρων των νυχιών μετά το λιμάρισμα, καθώς και για τον καθαρισμό της επιφάνειας των νυχιών. Μετακινείτε πάντα τη συσκευή σε κύκλους και μην κρατάτε ποτέ τον κώνο σε μια θέση καθώς η τριβή μπορεί να προκαλέσει θερμότητα.

J – Εξάρτημα για φρεζάκια γυαλόχαρτου

Κατάλληλο για να τοποθετηθούν τα φρεζάκια γυαλόχαρτου.

[Κ] – Φρεζάκια γυαλόχαρτου μίας χρήσης

Κατάλληλο για την αφαίρεση του ξηρού δέρματος των κάλων από το πέλμα και τη φτέρνα καθώς και για την περιποίηση των νυχιών. Το ειδικό χαρακτηριστικό που διαθέτουν τα φρεζάκια είναι ότι μπορούν να αφαιρεθούν και να απορριφθούν μετά από μία χρήση. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται 30 φρεζάκια μίας χρήσης. Μην αφαιρείτε όλους τους κάλους για να διατηρήσετε τη φυσική προστασία του δέρματος.

[Λ] – Προστατευτικό κάλυμμα για τη σκόνη των

νυχιών Εμποδίζει την εκτόξευση της σκόνης των νυχιών.

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής βγάζετε πάντα το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Σε δυσκολότερες βρομιές μπορείτε να υγροποιήσετε το πανί σε ήπιο σαπουνόνερο.
- Τα πρόσθετα εξαρτήματα μπορούν όταν απαιτείται για λόγους υγιεινής να καθαριστούν με ένα υγροποιημένο σε αλκοόλ πανί ή με μια βούρτσα. Στη συνέχεια φροντίζετε για καλό στέγνωμα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει κάτω.
- Προσέχετε, ώστε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, τότε παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή, μόνο αφού αυτή έχει στεγνώσει πλήρως.
- Για τον καθαρισμό δεν χρησιμοποιείτε χημικά υλικά καθαρισμού ή άλλα δυνατά καθαριστικά.
- Σε καμιά περίπτωση μη βυθίζετε τη συσκευή και το τροφοδοτικό σε νερό ή σε άλλα υγρά.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για παρελκόμενα και ανταλλακτικά επισκεφθείτε την τοποθεσία www.beurer.com ή απευθυνθείτε στην εκάστοτε διεύθυνση σέρβις στη χώρα σας (σύμφωνα με τη λίστα διευθύνσεων σέρβις). Τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά διατίθενται επίσης στο εμπόριο.

Περιγραφή	Άρθρο ή αριθμός παραγγελίας
1 x Λεπτός κώνος με επίστρωση ζαφειριού 1 x Τραχύς κώνος με επίστρωση ζαφειριού 1 x Λεπτός δίσκος με επίστρωση ζαφειριού 1 x Τραχύς δίσκος με επίστρωση ζαφειριού 1 x Κυλινδρική φρέζα 1 x Φρέζα σχήματος φλόγας 1 x Φρέζα με επίστρωση από ζαφείρι, στρογγυλ 1 x Φρεζάκι σχήματος βελόνας 1 x Κώνος με τσόχα 30 x φρεζάκια γυαλόχαρτου μίας χρήσης 1 x Προστατευτικό κάλυμμα για τη σκόνη των	572.14
Εξάρτημα για φρεζάκια γυαλόχαρτου	163.526

8. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.

Μπορείτε να βρείτε σημεία παράδοσης παλαιών συσκευών π.χ. στην τοπική κοινότητα ή δήμο, στις τοπικές επιχειρήσεις διάθεσης απορριμμάτων ή στον προμηθευτή σας.



9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τροφοδοσία Είσοδος: Έξοδος:	100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,5 A 30,0 V === 0,25 A; 7,5 W
Μέση αποδοτικότητα κατά τη λειτουργία:	≥ 80,3 %
Κατανάλωση ρεύματος με μηδενικό φορτίο:	≤ 0,09 W
Αριθμός στροφών:	2.000 - 5.400 rpm +/- 20%
Διαστάσεις συσκευής:	158 x 35 x 36,5 mm
Βάρος:	Τροφοδοτικό: περίπ. 93 g Συσκευή: περίπ. 111 g

Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές

Τη δήλωση συμμόρφωσης για αυτό το προϊόν θα βρείτε εδώ: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.

