



**MOBIAK®**  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΣΠΑΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

**USER MANUAL: FOLDABLE ALUMINUM STICK**

**REF:**

**0806520**

**0809246**

**0809256**

**0806523**

**0810207**



Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Read the instruction manual before use and keep it for future reference.

Important safety instructions

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μπαστούνι μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα για υποβοήθηση στο περπάτημα. Συναρμολογείται πολύ εύκολα αφού ενώσετε τα 4 τμήματα που διαθέτει για τη σπαστή έκδοση. Για την Ρυθμιζόμενη έκδοση, ξεσφίξτε την ροδέλα ασφαλείας για να προσαρμόσετε το ύψος και σφίξτε ξανά για σταθεροποίηση.

Για το Μπαστούνι με φακό, (κωδ. **0810207**) ξεβιδώστε την υποδοχή πίσω από την λαβή και τοποθετήστε μία μπαταρία AA για λειτουργήσει ο ενσωματωμένος φακός.

Διαθέτει πλαστική συσκευασία αποθήκευσης.

Υλικό κατασκευής σκελετού: Αλουμίνιο

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Να καθαρίζετε τακτικά το μπαστούνι.
- Μην αφήνετε το μπαστούνι βρεγμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα - ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που εγκρίνει η MOBIAC A.E.
- Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του μπαστουιού (100Kg).

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Χρησιμοποιείτε κρύο νερό και ήπια καθαριστικά για το καθαρισμό του μπαστουιού
- Στεγνώνετε πάντα με ένα μαλακό πανί
- Λεκέδες, λάδια πρέπει να αφαιρούνται από την επιφάνεια του μπαστουιού

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το μπαστούνι μετά από κάθε χρήση του με μαλακό πανί.
- Κάνετε πάντα ένα τεστ χρήσης του μπαστουιού προτού το χρησιμοποιήσει ο χρήστης.
- Ελέγχεται το παπουτσάκι σε τακτά διαστήματα και αλλάξτε το εάν έχει φθαρεί. Κωδικός για ανταλλακτικό Παπουτσάκι Μαύρο είναι 0809363. και 0810599 για το μπαστούνι με τον φακό

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ (!)

- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του προϊόντος σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο.
- Η χρήση της παρακάτω συσκευής απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAC A.E. απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAC A.E. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη συσκευή και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

### Φόρμα Εγγύησης

#### Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

.....

Ημ/νία Αγοράς: .....S/N.....

LOT:.....Τηλέφωνο: .....

#### Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία : .....

Διεύθυνση:.....

.....

Τηλέφωνο: .....

Σφραγίδα καταστήματος

### ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

ΚΑΤΗΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



## PRODUCT DESCRIPTION-INTENDED USE

This aluminum stick can be used by people for walking assistance.

The foldable stick can be assembled easily joining the 4 pieces which are included.

For the adjustable stick, untighten the safety washer to adjust the height and tighten again for the stabilization.

For the Stick with the light (code 0810207) unscrew the socket behind the handle & put one battery AA so the light can work.

It has plastic storage packing

Frame construction material: Aluminum

## SAFETY ADVICE

- Regularly clean the stick
- Do not let the stick wet.
- Check periodically the stick and if you find a damage please fix it at an authorized partner
- Do not use unauthorized parts other than those approved by Mobiak
- Don't put weight on the stick over than the permissible.

## CLEANING

- Use cold water and mild soap to clean the stick
- Dry it with a soft cloth
- Dirt, oil or debris must be removed from the stick

## MAINTENANCE

- Clean the stick after each use with a soft cloth.
- Do a complete test - usage, before its use
- Check the ferrule rubber tip often and change it if it is worn. Spare part code for the ferrule rubber tip is 0809363 and 0810599 for the stick with the light.

## DECLARATION OF CONFORMITY

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

## ATTENTION (!)

- In case of failure or malfunction of your product, please contact your authorized and trained dealer.
- Use of the following product is prohibited for purposes other than those specified in this manual
- MOBIAK SA disclaims any responsibility for damage resulting from improper use of the product or use other than that set forth in this manual.
- MOBIAK SA reserves the right to make changes to the product and the following manual without notice in order to improve its features.



## ENVIROMENTAL PROTECTION



If your product needs replacement ,or you do not use it, consider the environment protection:

- 1) Do not dispose your product with other waste (this the meaning of the recycled symbol).
- 2) Contact your local authority to instruct you the recycling centers for your product.
- 3) Recycling your no use product, you protect the environment and help the exploitation of new materials from your product .

## **WARRANTY**

The product has warranty for one (1) year from the purchase date.

The warranty covers factory defects and not damages resulting from improper use / maintenance of the product.

The warranty apply factory defects & DOES NOT apply damages resulting from improper use , poor maintenance, modification, abuse or non-compliance with the product's operating instructions.

Damage or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) and transportation companies are not covered by the warranty.

### **Warranty Form**

#### **Buyers Data**

Name: .....

Date of purchase: ..... S/N .....

LOT:..... Phone: .....

#### **Resellers Data**

Name :

.....  
.....

Address:.....

.....

Phone: .....

**Reseller Stamp**

### **INCIDENT REPORTING:**

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.



MOBIAK S.A

KATHIANA AKROTIRIOY, XANIA - KPHTH

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



















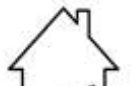

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/TECHNICAL INFORMATION

CODE	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION	MAX LOAD	ADJUSTABLE HEIGHT
0806520	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΠΡΟΝΖΕ	ADJUSTABLE BROWN-PLASTIC HANDLE	100Kg	73-93 cm
0809246	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ	ADJUSTABLE BLACK-PLASTIC HANDLE	100Kg	73-93 cm
0809256	ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΥΡΟ	FOLDABLE BLACK-PLASTIC HANDLE	100Kg	83-93 cm
0806523	ΣΠΑΣΤΟ ΜΠΡΟΝΖΕ	FOLDABLE BROWN-PLASTIC HANDLE	100Kg	83-93 cm
0810207	ΡΥΘΜ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΦΑΚΟ	ADJUSTABLE STICK WITH SELF-STAND FERRULE & LIGHT	100Kg	80-100 cm



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive