

beurer

FM 90



EL Συσκευή μασάζ ποδιών
Οδηγίες χρήσης

CE



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση, διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες και τηρήστε τις υποδείξεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο στον οικιακό/ιδιωτικό τομέα, όχι στον επαγγελματικό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου αυτής της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να απορρίπτεται. Αν το καλώδιο δεν αποσυνδέεται από τη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται όλη η συσκευή.
- Η συσκευή έχει καυτή επιφάνεια. Τα άτομα που δεν μπορούν να αισθανθούν τη θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής και μην τοποθετείτε τίποτα στα περιστρεφόμενα μέρη. Προσέξτε ώστε τα κινούμενα μέρη να μπορούν πάντα να κινούνται ελεύθερα.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης παύει να ισχύει η εγγύηση.

Πίνακας περιεχομένων

1. Παραδοτέος εξοπλισμός.....	3	7. Χρήση	8
2. Επεξήγηση συμβόλων.....	3	8. Καθαρισμός και φροντίδα	10
3. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης	4	9. Τι να κάνω σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα;.....	11
4. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας	5	10. Απόρριψη	11
5. Περιγραφή συσκευής	7	11. Τεχνικά στοιχεία.....	11
6. Θέση σε λειτουργία	7	12. Εγγύηση/Σέρβις	11









1. Παραδοτέος εξοπλισμός


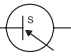



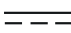

Ελέγξτε τον παραδιδόμενο εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική χαρτονένια συσκευασία είναι ακέραιη και το περιεχόμενο πλήρες. Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώσετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και να αφαιρέσετε το εκάστοτε υλικό συσκευασίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορο σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.

- 1 x συσκευή μασάζ ποδιών
- 1 x τροφοδοτικό
- 1 x Οι παρούσες οδηγίες χρήσης

2. Επεξήγηση συμβόλων

Στις οδηγίες χρήσης και στην πινακίδα τύπου χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Προειδοποιητική υπόδειξη για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Υπόδειξη ασφαλείας για πιθανές ζημιές στη συσκευή/στα παρελκόμενα.
	Υπόδειξη	Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες.
	Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους.	
	Προσοχή στις οδηγίες χρήσης	
	Πράσινη τελεία: Διπλό σύστημα διάθεσης Γερμανία	
	Απορρίψτε τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο, σύμφωνα με το περιβάλλον	
	Συσκευή κατηγορίας προστασίας 2	
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Κατασκευαστής	
IP 20	Με προστασία από στερεά ξένα σώματα, με διάμετρο μεγαλύτερη από 12,5 mm	
CE	Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.	

	Ενεργειακή απόδοση επίπεδο 6
	Τροφοδοτικό
	Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων
	Πολικότητα
	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
	Συνεχές ρεύμα Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για συνεχές ρεύμα
	Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου

3. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για μασάζ ποδιών σε ανθρώπους. Η συσκευή προορίζεται μόνο για **ίδια χρήση**, όχι για ιατρική ή εμπορική χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και με τον τρόπο που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη! Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ισχύουν για σας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποδείξεις. Σε περίπτωση που δεν είσατε βέβαιοι αν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς, ρωτήστε τον γιατρό σας.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών σε περίπτωση μεταβολής, λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, στην περιοχή των ποδιών (π.χ. ανοιχτές πληγές, μυρμηγκιές, μύκητες).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών αν πάσχετε από παθήσεις του δέρματος, τραυματισμούς ή φλεγμονές, οξείας ή χρόνιας μορφής (όπως π.χ. επώδυνες και ανώδυνες φλεγμονές, ερυθρότητα., δερματικά εξανθήματα, φλεβίτιδες, αρτηριακές θρομβώσεις, φλεβικές θρομβώσεις, θρομβοφλεβίτιδα, κισσούς, αλλεργίες, εγκαύματα, μώλωπες, πρηξίματα, πληγές σε διαδικασία επούλωσης και χειρουργικές ουλές).
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών μόνο σε απολύτως υγιές και καθαρό δέρμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών σε ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών για πάνω από 15 λεπτά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών στον ύπνο, κατά την οδήγηση οχήματος ή κατά τον ταυτόχρονο χειρισμό μηχανημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών σε ιστούς επιρρεπείς σε αιμορραγίες.
- Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών χωρίς επιτήρηση. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση που δεν είσατε βέβαιοι αν η συσκευή μασάζ ποδιών είναι κατάλληλη για εσάς, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση της συσκευής μασάζ ποδιών.

- Εάν υποφέρετε από σοβαρή ασθένεια ή εάν έχετε χειρουργηθεί παλαιότερα στο πόδι, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση της συσκευής μασάζ ποδιών.
- Αν πάσχετε από διαβήτη ή θρομβώσεις, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών.
- Σε περίπτωση που υποφέρετε από διαταραχές ευαισθησίας με μειωμένη αίσθηση του πόνου (όπως π.χ. μεταβολικές διαταραχές), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών.
- Αν υποφέρετε από πόνους από αδιευκρίνιστη αιτία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών.

4. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης! Η μη τήρηση των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ατόμων ή υλικές ζημιές. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και φροντίστε να είναι διαθέσιμες και στους άλλους χρήστες. Μεταβιβάστε αυτές τις οδηγίες σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού από το καλώδιο του τροφοδοτικού και κίνδυνος πνιγμού από τα μικρά τεμάχια που μπορεί να καταποθούν.

Ηλεκτροπληξία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και σύνεση για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Λειτουργείτε γι' αυτό τη συσκευή

- μόνο στην τάση δικτύου που αναγράφεται στη συσκευή,
- ποτέ αν η συσκευή ή τα παρελκόμενα παρουσιάζουν εμφανείς βλάβες,
- ποτέ κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Σε περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργιών απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή για να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα. Ποτέ μην κρατάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Κρατάτε απόσταση ανάμεσα στα καλώδια και τις θερμές επιφάνειες. Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο δεν έρχονται σε επαφή με νερό, ατμούς ή άλλα υγρά.

Χρησιμοποιείτε γι' αυτό τη συσκευή

- μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους (π.χ. σε καμία περίπτωση σε μπανιέρα ή σάουνα),
- μόνο με στεγνά χέρια,

Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος. Μην εισάγετε βελόνες ή αιχμηρά αντικείμενα. Προσέχετε το καλώδιο ρεύματος να μην τοποθετείται ή τραβιέται πάνω από κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Σε καμία περίπτωση μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε αμέσως το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η ίδια ή τα παρελκόμενα παρουσιάζουν εμφανείς βλάβες. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε χτυπήματα και μην την αφήνετε να πέφτει.

Επισκευή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς. Εξαιτίας ακατάλληλων επισκευών μπορεί να προκληθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χρήστη. Για επισκευές απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης ή μη τήρησης αυτών των οδηγιών χρήσης υπάρχει υπό ορισμένες συνθήκες κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς!

Γι' αυτό θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή μασάζ ποδιών

- ποτέ χωρίς επίβλεψη, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά κοντά,
- ποτέ κάτω από κάλυμμα, όπως π.χ. κουβέρτα, μαξιλάρι, ...
- ποτέ κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Χειρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά από κάθε χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την πρίζα.

- Μην κάθεστε ή στέκεστε με όλο το βάρος σας στα κινούμενα μέρη της συσκευής και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και την υγρασία.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή και το τροφοδοτικό σε νερό ή άλλα υγρά.


Βλάβη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς. Εξαιτίας ακατάλληλων επισκευών μπορεί να προκληθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χρήστη. Για επισκευές απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Σε περίπτωση βλάβης μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αλλά απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.
- Για εξασφάλιση μίας αποτελεσματικής λειτουργίας της συσκευής δεν πρέπει να την αφήσετε να πέσει κάτω ούτε να την αποσυναρμολογήσετε.
- Ελέγξτε τη συσκευή για ενδείξεις φθοράς ή βλάβης. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή σε περίπτωση που η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, πριν από την περαιτέρω χρήση πρέπει να την φέρετε στον κατασκευαστή ή στον έμπορο.
- Θέτετε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας αν είναι χαλασμένη ή παρουσιάζονται δυσλειτουργίες.
- Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να ανοίξετε και/ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Αναθέτετε τις επισκευές μόνο στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε εξουσιοδοτημένους εμπόρους. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση.

5. Περιγραφή συσκευής

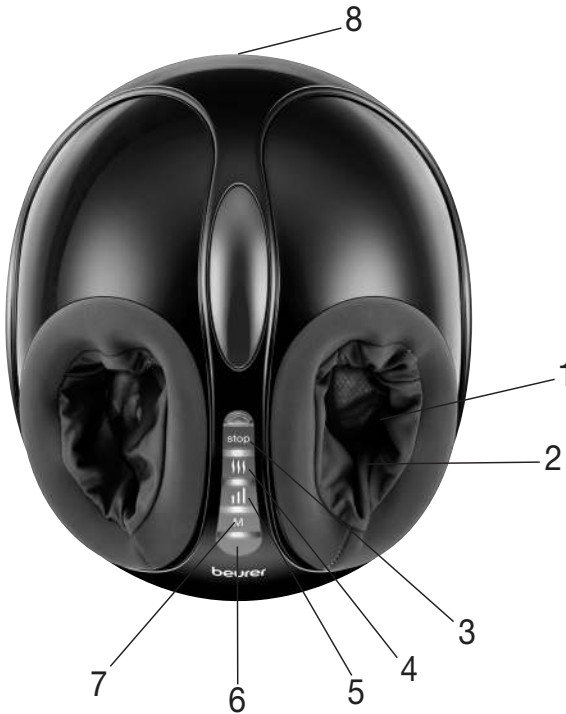


1. Επιφάνεια μασάζ με κεφαλές μασάζ
2. Αφαιρούμενο κάλυμμα (πλυνόμενο)
3. Πλήκτρο Stop 
4. Πλήκτρο ζέστης 
5. Πλήκτρο έντασης 
6. Πλήκτρο ON/OFF 
7. Πλήκτρο λειτουργίας 
8. Υποδοχή σύνδεσης για το τροφοδοτικό


6. Θέση σε λειτουργία

Σύνδεση τροφοδοτικού

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών με το τροφοδοτικό που τη συνοδεύει, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το τροφοδοτικό στη συσκευή μασάζ ποδιών. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Αφαιρέστε ολόκληρο το υλικό συσκευασίας.
2. Ελέγξτε τη συσκευή μασάζ ποδιών, το τροφοδοτικό και το καλώδιο ρεύματος για ζημιές.
3. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού στην υποδοχή σύνδεσης στην κάτω πλευρά της συσκευής μασάζ ποδιών.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε κατάλληλη πρίζα.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Κίνδυνος να σκοντάψετε! Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος με τρόπο ώστε να μην σκοντάψετε σε αυτό.

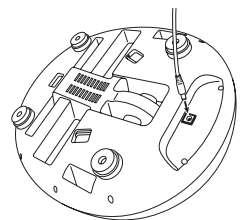

7. Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών μόνο καθιστοί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών όρθιοι.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ το πολύ 15 λεπτά. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας του μασάζ, η υπερβολική διέγερση μπορεί να οδηγήσει σε ένταση των μυών αντί για χαλάρωση.


Υπόδειξη

Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης που έχει ρυθμιστεί για λειτουργία το πολύ 15 λεπτών.

Για να ξεκινήσετε τη διέγερση των ποδιών, ενεργείτε ως εξής:

Βήμα 1: Τοποθέτηση της συσκευής μασάζ ποδιών στο δάπεδο

- Τοποθετείτε τη συσκευή μασάζ ποδιών σε μια επίπεδη και σταθερή βάση. Τοποθετείτε μια καρέκλα σε τέτοια απόσταση από τη συσκευή μασάζ ποδιών ώστε να τη φτάνετε με ευκολία με τα πόδια σας όταν κάθεστε.

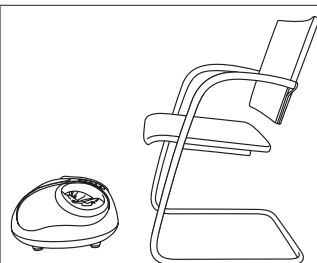


Βήμα 2: Τοποθέτηση ποδιών στη συσκευή μασάζ ποδιών


Υπόδειξη


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών είτε ξυπόλυτοι είτε με κάλτσες.

- Γλιστρήστε με τα πόδια σας στη συσκευή μασάζ ποδιών. Προσέχετε η επιφάνεια των ποδιών σας να ακουμπά στις κεφαλές μασάζ.

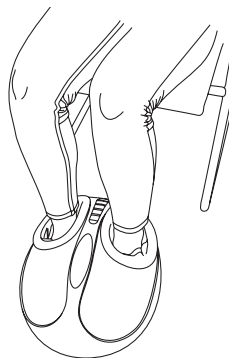

Βήμα 3: Ενεργοποίηση συσκευής μασάζ ποδιών

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF . Η λυχνία LED στο πλήκτρο ON/OFF αρχίζει να ανάβει με πράσινο χρώμα. Η συσκευή μασάζ ποδιών ενεργοποιείται στη Λειτουργία 1 και στη χαμηλότερη ένταση.

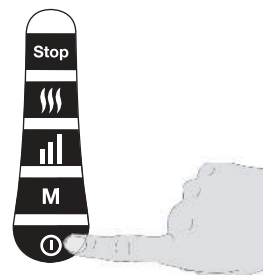


Βήμα 4: Ρύθμιση λειτουργίας **M**

Η συσκευή μασάζ ποδιών διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας μασάζ. Επιλέξτε με το πλήκτρο λειτουργίας **M** τη λειτουργία που θέλετε.

Λειτουργία 1: LED πράσινη = μόνο πίεση αέρα

Λειτουργία 2: LED μπλε = μασάζ χωρίς πίεση αέρα

Λειτουργία 3: LED κόκκινη = μασάζ με πίεση αέρα

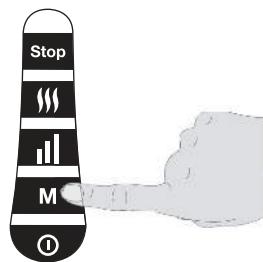


Βήμα 5: Ρύθμιση έντασης **||||**

Η συσκευή μασάζ ποδιών έχει τρεις βαθμίδες έντασης για το μασάζ πεπιεσμένου αέρα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή). Επιλέξτε με το πλήκτρο έντασης **||||** τη βαθμίδα έντασης που θέλετε.

LED πράσινη = χαμηλή ένταση

LED μπλε = μεσαία ένταση


LED κόκκινη = υψηλή ένταση

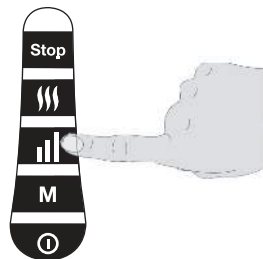

Βήμα 6: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμότητας **|||||**


Η συσκευή μασάζ ποδιών έχει λειτουργία θέρμανσης που ενεργοποιείται με διακόπτη. Με τη λειτουργία θέρμανσης μπορείτε να ζεσταίνετε τα πόδια σας, ενώ κάνετε μασάζ.

- Για να ενεργοποιήσετε επιπλέον τη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε κατά τη λειτουργία μασάζ το πλήκτρο θέρμανσης **|||||**. Η λυχνία LED στο πλήκτρο θέρμανσης ξεκινά να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε ξανά το πλήκτρο θέρμανσης. Η λυχνία LED στο πλήκτρο θέρμανσης σβήνει.

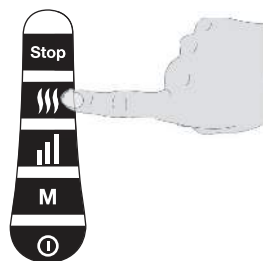


Βήμα 7: Διακοπή μασάζ ποδιών

- Εάν κατά τη χρήση εμφανιστεί ένα πολύ έντονο ή δυσάρεστο αίσθημα πίεσης, πατήστε το πλήκτρο Stop για διακοπή της θεραπείας. Για να ξεκινήσετε ξανά το μασάζ ποδιών, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF **⓪**.

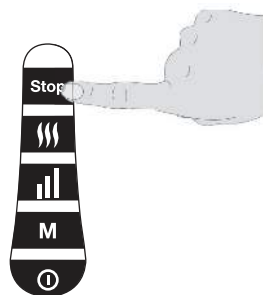

Βήμα 8: Απενεργοποίηση συσκευής μασάζ ποδιών

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ① στην ενεργοποιημένη συσκευή μασάζ ποδιών. Η λυχνία LED στο πλήκτρο ON/OFF ① σβήνει.

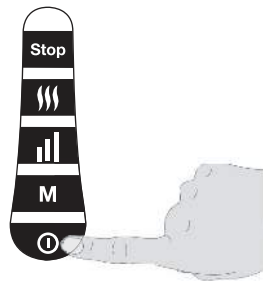

8. Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός της συσκευής μασάζ ποδιών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέετε τη συσκευή μασάζ ποδιών από την πρίζα πριν από κάθε καθαρισμό.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μασάζ ποδιών μόνο με τον τρόπο που αναφέρεται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διεισδύσει υγρό στη συσκευή μασάζ ποδιών ή στα παρελκόμενα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μασάζ ποδιών με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Αν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, μπορείτε επίσης να υγράνετε το πανί με ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Καθαρισμός των καλυμμάτων

Τα καλύμματα στους κυλίνδρους μασάζ μπορούν να πλυθούν στο χέρι. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Για να αφαιρέσετε τα καλύμματα από τη συσκευή μασάζ ποδιών, χαλαρώστε το κούμπωμα σκρατς στα καλύμματα.
2. Πλύνετε τα καλύμματα στο χέρι.
3. Αφήστε τα καλύμματα να στεγνώσουν. Τοποθετήστε πάλι τα καλύμματα στη συσκευή μασάζ ποδιών μόνο εφόσον έχουν στεγνώσει πλήρως.
4. Προσέχετε το κούμπωμα σκρατς στα καλύμματα να συνδεθεί καλά στη συσκευή μασάζ ποδιών.

Αποθήκευση

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να την αποθηκεύσετε στην αρχική της συσκευασία σε στεγνό περιβάλλον και χωρίς την απόθεση φορτίων επάνω στη συσκευή. Φυλάσσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή μασάζ ποδιών.

9. Τι να κάνω σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα;

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Οι κεφαλές μασάζ περιστρέφονται αργά	Οι κεφαλές μασάζ καταπονούνται υπερβολικά.	Ελευθερώστε τις κεφαλές μασάζ.
Οι κεφαλές μασάζ δεν κινούνται	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο.	Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερθέρμανση.	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά, βάλτε πάλι το βύσμα στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

10. Απόρριψη

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Διαθέστε ως απόβλητο τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ (Waste Electrical and Electronic Equipment). Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόσυρση δημοτική υπηρεσία.



11. Τεχνικά στοιχεία

Λειτουργία στο δίκτυο ρεύματος: Είσοδος Έξοδος	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A 24,0 V === 2,0 A, 48,0 W
Μέση αποδοτικότητα κατά τη λειτουργία:	≥ 89,35 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %):	≥ 87,87 %
Κατανάλωση ρεύματος με μηδενικό φορτίο:	≤ 0,08 W
Διαστάσεις:	36 x 42 x 25 cm
Βάρος:	περίπου 4,5 kg

12. Εγγύηση/Σέρβις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.

