

beurer

SI 40



EL Νεφελοποιητής ατμού
Οδηγίες χρήσης

CE

Περιεχόμενα

1. Γνωριμία με τη συσκευή.....	2
2. Επεξήγηση συμβόλων.....	2
3. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας	3
4. Περιγραφή συσκευής και παρελκομένων	5
5. Χειρισμός νεφελοποιητή ατμού.....	6
6. Καθαρισμός και απολύμανση	7
7. Απόρριψη.....	8
8. Επίλυση προβλημάτων	8
9. Τεχνικά στοιχεία	9
10. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα.....	9
11. Εγγύηση και σέρβις.....	9

Παραδοτέος εξοπλισμός

- Νεφελοποιητής ατμού
- Μάσκα
- Οδηγίες χρήσης

1. Γνωριμία με τη συσκευή

Αγαπητοί πελάτες,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της σειράς προϊόντων μας. Το όνομά μας ταυτίζεται με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία υπόκεινται σε λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας, στους τομείς θερμότητας, βάρους, αρτηριακής πίεσης, θερμοκρασίας σώματος, σφυγμού, ήπιας θεραπείας, μασάζ και αέρα.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρούσες οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση, διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες και τηρήστε τις υποδείξεις.

Φιλικά

Η ομάδα της Beurer

Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Η συσκευή χρησιμεύει για την παραγωγή αερολυμάτων μέσω της ατμοποίησης και είναι κατάλληλη για την ύγρανση των ανώτερων αναπνευστικών οδών. Η χρήση πραγματοποιείται στο στόμα, τη μύτη, τον λαιμό και έχει ευεργετική επίδραση στο κρυολόγημα. Είναι δυνατή η προσθήκη προσθέτων όπως π.χ. αιθέριων ελαίων.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για νέα χρήση κατόπιν προετοιμασίας. Η προετοιμασία συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση της μάσκας, καθώς και μια απολύμανση της επιφάνειας της συσκευής με ένα απολυμαντικό του εμπορίου. Προσέξτε ότι η αντικατάσταση της μάσκας θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από περισσότερα άτομα.

Συνιστούμε να αντικαθιστάτε τη μάσκα το αργότερο ύστερα από έναν χρόνο.

2. Επεξήγηση συμβόλων

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα.

 Προειδοποίηση	Προειδοποιητική υπόδειξη για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας.
 Προσοχή	Υπόδειξη ασφαλείας για πιθανές ζημιές στη συσκευή/στα παρελκόμενα.
 Υπόδειξη	Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες.
	Προσοχή στις οδηγίες χρήσης
	Συσκευή κατηγορίας προστασίας 2
	Κατασκευαστής
	On
	Off
IP21	Με προστασία από ξένα σώματα $\geq 12,5$ mm και από νερό που στάζει κάθετα
	Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
	Απορρίψτε τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο, σύμφωνα με το περιβάλλον

3. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας



Προειδοποίηση

- Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώνετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής βλ. στο κεφάλαιο «8. Επίλυση προβλημάτων».
- Η χρήση της συσκευής δεν υποκαθιστά την εξέταση και τη θεραπεία από γιατρό. Γι' αυτόν τον λόγο, για οποιοδήποτε είδος πόνου ή ασθένειας να συμβουλευέστε πάντα πρώτα τον γιατρό σας.
- Αν έχετε κάθε είδους ανησυχίες για την υγεία σας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας!
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τη χρήση του νεφελοποιητή ατμού, τηρείτε τα γενικά μέτρα υγιεινής.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, νιώσετε αδιαθεσία ή πόνο, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Το πρόσωπό σας δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στη μάσκα, διότι αλλιώς ο καυτός ατμός μπορεί να σας προκαλέσει εγκαύματα. Κατά την εφαρμογή κλείνετε τα μάτια σας και προστατεύετε τις ευαίσθητες στη θερμότητα περιοχές.
- Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή (αφαίρεση καλύμματος, περιστροφή καπακιού), ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Αφήστε έπειτα τη συσκευή να κρυώσει. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν εύφλεκτα αέρια και υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού και/ή συντήρησης πρέπει να απενεργοποιείται η συσκευή και να αφαιρείται το βύσμα από την πρίζα.
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά (κίνδυνος ασφυξίας).
- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω περιτύλιξης στα καλώδια, φυλάσσετε τα καλώδια μακριά από μικρά παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο με την τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μην τη χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εισέλθουν υγρά στη συσκευή.
- Προστατεύετε τη συσκευή από δυνατές κρούσεις.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο του ρεύματος ποτέ με υγρά χέρια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα.
- Μην σφηνώνετε ή λυγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μην το τραβάτε πάνω από αιχμηρά αντικείμενα, μην το αφήνετε να κρεμάσει και προστατεύετε το από τη θερμότητα.
- Συνιστούμε το ξετύλιγμα όλου του καλωδίου για να αποτραπεί μία επικίνδυνη υπερθέρμανσή του.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της συσκευής πάθει κάποια ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την τεχνική του υπηρεσία ή κάποιον άλλο τεχνικό, για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Κατά το άνοιγμα της συσκευής υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η διακοπή της παροχής ρεύματος είναι εξασφαλισμένη μόνο εφόσον το βύσμα του ρεύματος έχει βγει από την πρίζα.
- Αν η συσκευή πέσει, εκτεθεί σε ακραία υγρασία ή υποστεί άλλου είδους ζημιές, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή τον αντιπρόσωπο.
- Ο νεφελοποιητής ατμού επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με κατάλληλα παρελκόμενα της Beurer.

Προσοχή

- Η διακοπή ρεύματος, οι αιφνίδιες διαταραχές ή άλλες δυσμενείς συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αδυναμία λειτουργίας της συσκευής. Γι' αυτό συνιστάται να έχετε μια συσκευή αντικατάστασης.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.
- Η συσκευή και το καλώδιο ρεύματος δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους στους οποίους είχαν χρησιμοποιηθεί προηγούμενως σπρέι. Πριν από τη θεραπεία αυτοί οι χώροι πρέπει να αερίζονται.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις σχισμές αερισμού.
- Μην μπλοκάρτε τις σχισμές αερισμού.
- Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή με άδειο δοχείο αρώματος.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή ποτέ με άδειο δοχείο θέρμανσης νερού.
- Για λόγους υγιεινής είναι οπωσδήποτε απαραίτητο ο κάθε χρήστης να χρησιμοποιεί τα δικά του παρελκόμενα.
- Μετά τη χρήση τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την πρίζα ρεύματος.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο που προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται στις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η συσκευή περιέχει ασφάλεια προστασίας. Αυτή επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή διαθέτει επίσης μια θερμοασφάλεια που απενεργοποιεί τον νεφελοποιητή ατμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Ο λαμπτήρας στον διακόπτη ON/OFF σβήνει αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή.
 2. Τραβήξτε έπειτα το βύσμα από την πρίζα.
 3. Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει εντελώς η συσκευή.
 4. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και παρατηρήστε εάν λειτουργεί πάλι χωρίς προβλήματα. Αν ισχύει αυτό, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Διαφορετικά, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Γενικές οδηγίες

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά:
 - σε ανθρώπους,
 - για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- **Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη!**
- Σε οξείες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι πρώτες βοήθειες έχουν προτεραιότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απεσταγμένο νερό και αρωματικά έλαια. Η χρήση άλλων υγρών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του νεφελοποιητή ατμού.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική ή κλινική χρήση, αλλά αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση στο σπίτι!

Πριν από θέση σε λειτουργία

⚠ Προσοχή

- Πριν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να απομακρύνετε κάθε υλικό συσκευασίας.
- Προφυλάξτε τη συσκευή από σκόνη, ρύπους και υγρασία και μην τη σκεπάζετε σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξαιρετικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, σε περίπτωση βλάβης ή σφαλμάτων λειτουργίας.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση.


Επισκευή

ⓘ Υπόδειξη

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.
- Για επισκευές απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

4. Περιγραφή συσκευής και παρελκομένων

Επισκόπηση νεφελοποιητή ατμού

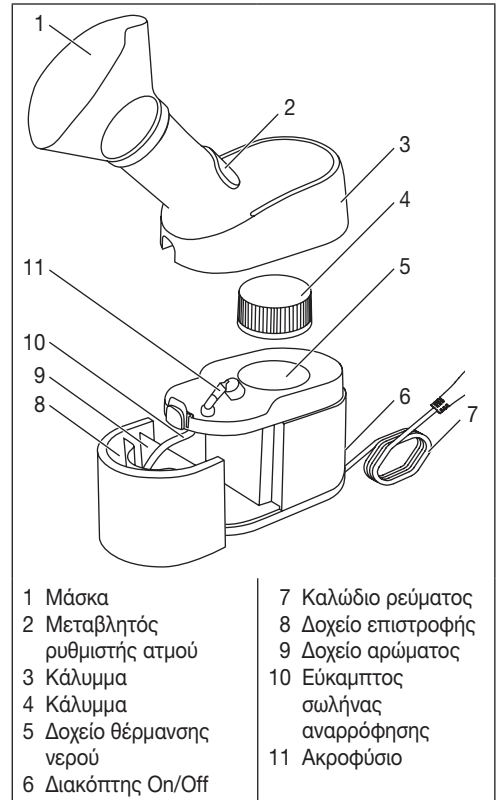

5. Χειρισμός νεφελοποιητή ατμού

❗ Υπόδειξη

Τηρείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και απολύμανση» πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη φύλαξη της συσκευής.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρίζα κοντά στο σημείο τοποθέτησης.

2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω, πιέζοντας το κουμπί επάνω στο δοχείο αρώματος/δοχείο επιστροφής.



3. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο με την προειδοποιητική υπόδειξη από το καπάκι.

Περιστρέψτε αριστερόστροφα το καπάκι. Λαμβάνετε υπόψη για αυτό τη σήμανση επάνω στο καπάκι. Αφαιρέστε το καπάκι.



4. Γεμίστε το δοχείο θέρμανσης νερού με περ. 25 ml νερό (Μην πληρώνετε το δοχείο θέρμανσης νερού πάνω από τη σήμανση «MAX»). Γεμίζετε το δοχείο θέρμανσης νερού αποκλειστικά με νερό και κανένα άλλο υγρό!



5. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι και περιστρέψτε το μέχρι τέρμα δεξιόστροφα. Λαμβάνετε υπόψη για αυτό τη σήμανση επάνω στο καπάκι.

6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα από επάνω.

7. Τραβήξτε έξω το δοχείο αρώματος/δοχείο επιστροφής. Γεμίστε το δοχείο αρώματος με το υγρό προς νεφελοποίηση (π.χ. αλατούχο διάλυμα). Μην γεμίζετε το δοχείο αρώματος πάνω από τη σήμανση «MAX» (60ml).



8. Τοποθετήστε πάλι το δοχείο αρώματος/δοχείο επιστροφής στη συσκευή. Προσέχετε ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης να μην αγγίζει το κάτω μέρος του δοχείου αρώματος.



9. Σπρώξτε τον μεταβλητό ρυθμιστή ατμού για μικρότερα σωματίδια ατμού προς τα κάτω, για μεγαλύτερα προς τα επάνω.



10. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στη θέση «OFF». Περάστε το καλώδιο έτσι, ώστε να μην σκοντάφτει κανένας σε αυτό. Βάλτε το βύσμα σε μια κατάλληλη πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή μόνο με την τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

11. Τοποθετήστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «ON».

12. Η συσκευή ξεκινάει μετά από 2 λεπτά περίπου την παραγωγή ατμού. Κατά τη χρήση πρέπει να κάθεστε σε ένα τραπέζι, σε όρθια θέση, χαλαρωμένοι και όχι σε πολυθρόνα για να μην συμπιέζονται οι αναπνευστικές οδοί και επηρεάζεται η θεραπεία. Αναπνεύστε βαθιά.

Προσέχετε να μην μπει ατμός από τη μάσκα στα μάτια σας. Συνιστούμε να κλείνετε τα μάτια κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μόλις μειωθεί η παραγωγή ατμού (μέγιστη διάρκεια περ. 10 λεπτά), θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «OFF».

13. Μετά από κάθε χρήση βγάzte το βύσμα από την πρίζα. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει τελείως (περίπου 10 λεπτά).

14. Καθαρίζετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

υγρασία ή υπόλοιπο νερού, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μικροοργανισμών.



4. Τραβήξτε έξω το δοχείο αρώματος/δοχείο επιστροφής.



5. Καθαρίστε το δοχείο αρώματος/δοχείο επιστροφής, το κάλυμμα, το καπάκι, τον σωλήνα επέκτασης και τη μάσκα με ζεστό νερό και ήπιο καθαριστικό μέσο. Ξεπλύνετε αυτά τα εξαρτήματα πολύ καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς. Η υπολειπόμενη υγρασία ή υπόλοιπο νερού, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μικροοργανισμών.

6. Αφού στεγνώσουν τελείως, μπορείτε να συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
7. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία.

Καθαρισμός κύριας συσκευής

- Ποτέ μην βυθίζετε την κύρια συσκευή σε νερό.
- Καθαρίστε την κύρια συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο πανί και με ένα ήπιο καθαριστικό. Μετά σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδια για να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή μέσα που ξύνουν την επιφάνεια.

6. Καθαρισμός και απολύμανση

⚠ Προειδοποίηση

Τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες υγιεινής για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία. Πριν από κάθε καθαρισμό πρέπει η συσκευή να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και να έχει κρυώσει.

Ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει (περ. 10 λεπτά), ο διακόπτης ON/OFF έχει τεθεί στη θέση «OFF» και η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.
2. Τραβήξτε το κάλυμμα της συσκευής προς τα επάνω, πιέζοντας το κουμπί επάνω στο δοχείο αρώματος/δοχείο επιστροφής.
3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το καπάκι. Λαμβάνετε υπόψη για αυτό τη σήμανση επάνω στο καπάκι. Αφαιρέστε το καπάκι. Αδειάστε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο θέρμανσης νερού. Στεγνώστε το, στη συνέχεια, με ένα καθαρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς με τον αέρα. Η υπολειπόμενη

Υπόδειξη

Κάθε άλλου είδους καθαρισμός ή άλλο καθαριστικό μέσο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Καθαρισμός ακροφυσίου

Υπόδειξη

Περιστασιακά μπορεί το ακροφύσιο που οδηγεί τον ατμό στον σωλήνα επέκτασης να έχει μπλοκάρει. Όταν η συσκευή παράγει σημαντικά μικρότερη ποσότητα ατμού ή καθόλου ατμό, τότε πρέπει να καθαρίσετε το ακροφύσιο.

1. Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω.
2. Στρέψτε δεξιόστροφα το ακροφύσιο. Τραβήξτε το ακροφύσιο προς τα επάνω.
3. Οδηγήστε ένα λεπτό αντικείμενο (για παράδειγμα μια βελόνα) στο ακροφύσιο για να καθαρίσετε το κανάλι αέρα.



4. Για να τοποθετήσετε ξανά το ακροφύσιο, ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα του ακροφυσίου στις εγχοπές στην κεφαλή ακροφυσίου. Στρέψτε το ακροφύσιο αριστερόστροφα έως τα στηρίγματα του ακροφυσίου να κουμπώσουν καλά.

Απολύμανση

Μπορείτε να απολυμάνετε τη μάσκα με βράσιμο.

- Αφαιρέστε τη μάσκα από τον σωλήνα επέκτασης.
- Τοποθετήστε τη μάσκα για 5 λεπτά σε νερό που βράζει.
- Στεγνώστε έπειτα τη μάσκα προσεκτικά με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε τη μάσκα όταν στεγνώσει εντελώς ξανά στον σωλήνα επέκτασης.

Αποθήκευση

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία (π.χ. λουτρό) και μην τη μεταφέρετε μαζί με υγρά αντικείμενα.
- Αποθηκεύετε και μεταφέρετε τη συσκευή προφυλαγμένη από τη συνεχόμενη και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος, καλύτερα μέσα στη συσκευασία.

7. Απόρριψη

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε διαθέστε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ- **WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική αρχή.

8. Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα/ερωτήσεις	Πιθανή αιτία/Αντιμετώπιση
Ο διακόπτης ON/OFF ενεργοποιήθηκε, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί.	1. Ελέγξτε τη σύνδεση ρεύματος στην πρίζα και εάν είναι σωστά συνδεδεμένο το βύσμα.
	2. Η συσκευή διαθέτει θερμοασφάλεια. Μετά την απενεργοποίηση τραβήξτε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και τηρήστε ένα χρόνο αναμονής (βλέπε «Ασφάλεια» στο κεφάλαιο 3 «Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας»).

Προβλήματα/ ερωτήσεις	Πιθανή αιτία/Αντιμετώπιση
Η ενεργο- ποιημένη συσκευή δεν παράγει κα- θόλου ή πολύ λίγο ατμό.	1. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο δοχείο του δοχείου θέρμανσης νερού.
	2. Ελέγξτε εάν υπάρχει υγρό στο δοχείο αρώματος.
	3. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και άλλα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα.
Η ενεργο- ποιημένη συσκευή δεν παράγει κα- θόλου ή πολύ λίγο ατμό.	4. Ελέγξτε το ακροφύσιο για έμφραξη. Καθαρίστε ενδεχο- μένως το ακροφύσιο (βλέπε «Καθαρισμός και απολύμανση» στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και απολύμανση»)
Χρειάζεται ο καθένας τη δική του μάσκα;	Από την άποψη της υγιεινής αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

9. Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο	SI 40
Διαστάσεις (ΠxΥxB)	265 x 260 x 96 mm
Βάρος	620 g
Όγκος πλήρωσης εσωτερικής θέρ- μανσης νερού	μέγ. 25 ml
Όγκος πλήρωσης δοχείου αρώματος	μέγ. 60 ml
Σύνδεση ρεύματος	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Θερμοκρασία ατμού	περ. 43 °C
Χρόνος βρασμού νερού	περ. 2 λεπτά
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας	περ. 10 λεπτά

Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: +10 °C έως +40 °C Σχετική υγρασία αέρα: 10% έως 95% Ατμοσφαιρική πίεση: 700 έως 1060 hPa
	Συνθήκες απο- θήκευσης και μεταφοράς
	Θερμοκρασία: 0 °C έως +60 °C Σχετική υγρασία αέρα: 10% έως 95% Ατμοσφαιρική πίεση: 500 έως 1060 hPa

Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την προαναφερόμενη διευθυνση εξυπηρέτησης, για να λάβετε λεπτομερή στοιχεία – όπως π.χ. τη δήλωση συμμόρφωσης CE.

10. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Ονομασία	Υλικό	REF
Μάσκα	PVC	601.34

11. Εγγύηση και σέρβις

Σε περίπτωση αξιώσεων στα πλαίσια της εργοστα-
σιακής εγγύησης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας
έμπορο ή στην τοπική αντιπροσωπεία (βλέπε λίστα
«Σέρβις διεθνώς»).

Επισυνάψτε με την επιστροφή της συσκευής ένα
φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς μαζί με μία
σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εργοστασιακής εγγύησης:

- Ο χρόνος ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης για προϊόντα της BEURER είναι 3 χρόνια ή – αν είναι μεγαλύτερος – αυξάνεται σύμφωνα με τον χρόνο ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, που ισχύει στην κάθε χώρα από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση αξιώσεων στα πλαίσια της εργο-
στασιακής εγγύησης, η ημερομηνία αγοράς πρέ-
πει να αποδεικνύεται με την απόδειξη αγοράς ή
τιμολόγιο.
- Μετά τις επισκευές (ολικές ή τμηματικές) της
συσκευής δεν παρατείνεται η ισχύς της εργοστασι-
ακής εγγύησης.

3. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκύπτουν λόγω
- α. αντικανονικού χειρισμού, π. χ. εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης,
 - β. επισκευών από την πλευρά του πελάτη ή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
 - γ. μεταφοράς από τον κατασκευαστή στον πελάτη ή κατά τη μεταφορά στο κέντρο σέρβις.
 - δ. η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για παρελκόμενα που υπόκεινται σε φυσική φθορά (μανσέτα, μπαταρίες κ.λπ.).
4. Αποκλείεται ιδίως κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές, που προκαλούνται από τη συσκευή, όταν λόγω βλάβης της συσκευής αναγνωριστούν αξιώσεις στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης.

