

Το αμαξίδιο που ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού.


Το FLASH είναι ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο φιλικό προς το παιδί. Είναι ιδανικό για ενεργά παιδιά και νέους ακόμη και από την ηλικία του νηπιαγωγείου. Έχει φανταστικό σχεδιασμό σκελετού από αλουμίνιο, ατελείωτες ρυθμίσεις και προσαρμογές σε κάθε του σημείο.

Το FLASH παραγγέλνεται κατόπιν λήψης μέτρων (**custom made**) για την τέλεια οδηγική συμπεριφορά του αμαξιδίου και την εργονομική τοποθέτηση του σώματος – κορμού.

- Αναδιπλούμενος σκελετός τύπου «χιαστή».
- Κατασκευάζεται από ελαφρύ και ανθεκτικό αλουμίνιο.
- Διατίθεται σε δύο μεγέθη σκελετού: MIDI – MAXI.
- Αναδιπλούμενο υποπόδιο με ρύθμιση ύψους και κλίσης.
- Πλαϊνά αλουμινίου.




Ο συγκολλημένος μπροστινός τροχός και οι διαθέσιμες επιλογές κάνουν το αμαξίδιο ευκίνητο και συμβάλλουν στο να μπορεί το παιδί να εξερευνηήσει τον κόσμο.

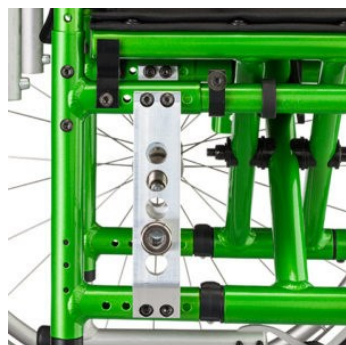

Το βάθος του καθίσματος μπορεί να αυξηθεί μέσω ρύθμισης κατά 4,5 cm και το πλάτος του καθίσματος μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας προσαρμογείς.



Το υποπόδιο ασφαλίζει και είναι σταθερό. Μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος έως και 20cm.

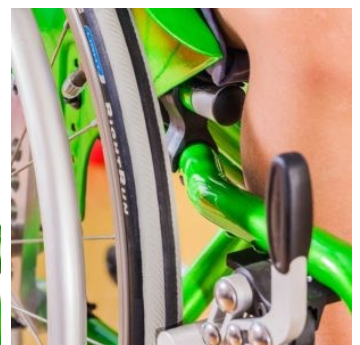

Ο σχεδιασμός του σκελετού επιτρέπει στα πόδια να έχουν άνετο χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	MIDI	MAXI
Πλάτος καθίσματος	240-300	320-400
Πλάτος αμαξιδίου (Camber 0°)	Πλάτος καθίσματος+180	
Πλάτος αμαξιδίου (Camber 3°)	Πλάτος καθίσματος+220	
Πλάτος αμαξιδίου (Camber 6°)	Πλάτος καθίσματος+260	
Βάθος καθίσματος	240-300	320-400
Ύψος καθίσματος εμπρός	390-470	390-480
Ύψος καθίσματος πίσω	360-440	390-470
Ύψος αμαξιδίου	Ύψος καθίσματος πίσω+Ύψος πλάτης+400	
Ύψος πλάτης	250-400	
Ρύθμιση κλίσης πλάτης	75° - 105°	
Μήκος υποποδίου	200-290	250-320 / 330-440
Μήκος αμαξιδίου με υποπόδιο	670-745	855-930
Μέγιστο βάρος χρήστη	75 Kg	
Βάρος αμαξιδίου	10 Kg	
Βάρος αμαξιδίου για μεταφορά	8 Kg	
Πίσω τροχοί σκελετός MIDI (550mm)	22"	
Πίσω τροχοί σκελετός MAXI (600mm)	24"	

Το BRIX είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του σώματος του παιδιού και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες αλλά και με το δικό σας γούστο!



Διαθέσιμα χρώματα σκελετού:

(Επιπλέον χρώματα διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση)

- Orange metallic
- Green metallic
- Silver chrome
- Tornado red
- Matt black
- Lemon reflective
- Blue metallic